

Unser Rollenpflaster-sortiment im Überblick

Leukoplast®
Wound care in best hands



Innovation ist bei uns fester Bestandteil der Marke

Bereits 1901 revolutionierte Leukoplast das chirurgische Klebeband: Mit der Zugabe von Zinkoxid zum Naturkautschukkleber konnte nicht nur die Haltbarkeit deutlich verbessert werden, sondern auch die Hautverträglichkeit. Seitdem entwickeln wir die Produktpalette von Leukoplast ständig weiter. Wir führen nicht nur neuartige Klebstoffe ein, sondern entwickeln auch bahnbrechende Trägermaterialien.

Und als Leukoplast die ntimikrobielle Spule und den Schutzring für Rollenpflaster auf den Markt brachte, war das nur die jüngste Demonstration unserer Innovationskraft!

Die Entwicklung von modernen Rollenpflastern

1901 entwickelte ein Apotheker das erste selbsthaftende und hautfreundliche Rollenpflaster und verkaufte es unter dem Markennamen Leukoplast. Damit war der Grundstein für ein umfangreiches Sortiment an Rollenpflastern gelegt: hochspezialisierte Produkte, die die passende Lösung für jede denkbare Anwendungen bieten. Trotzdem streben wir an, unser Angebot an Rollenpflastern kontinuierlich noch weiter zu verbessern, da dies ein zentraler Bestandteil der Marke Leukoplast ist: Wir streben nach Innovation!

› Heute bietet Leukoplast viele verschiedene Rollenpflaster an, angepasst an jeden Zweck und jeden Hauttyp!



Das Vorbild

Das 1901 auf den Markt gebrachte, Leukoplast Zinkoxid-Kautschukpflaster, wurde schnell zu einem weltweiten Erfolg. In den folgenden Jahren wurde die rote Spule zum Symbol für Zuverlässigkeit und Qualität.


* Based on laboratory studies carried out by SGS Germany GmbH on behalf of BSN Medical GmbH, 2016, data on file

MEDICAL EXPERIENCE since 1901

Leukoplast®

Die ganze Vielfalt unserer Rollenpflaster auf einen Blick

	Leukoplast	Leukoplast wasserfest	Leukoplast hospital	Leukosilk	Leukoflex	Leukofix	Leukopor	Leukoplast skin sensitive
Kleber	Zinkoxid-Kautschuk-Harz	Zinkoxid-Kautschuk-Harz	Zinkoxid-Kautschuk-Harz	Polyacrylat	Polyacrylat	Polyacrylat	Polyacrylat	Silikon
Latex	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kolophonium	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lanolin	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Träger	Zellwolle (Viskose)	Zellwolle (Viskose) imprägniert“	Zellwolle (Viskose)	Zelluloseacetat	Polyethylen-Folie	Polyethylen-Folie	Polyester / Viskose-Vlies	Zelluloseacetat
Farbe	Beige	Weiß	Naturweiß	Weiß	Transparent	Transparent	Weiß	Weiß / transparent
Hautverträglichkeit	Für normal empfindliche Haut	Für normal empfindliche Haut	Für normal empfindliche Haut	Für empfindliche Haut	Für empfindliche Haut	Für empfindliche Haut	Für empfindliche Haut	Für besonders empfindliche Haut
Reißbarkeit	Reißbar	Reißbar	Reißbar	Einfach zu reißen, auch längs	Reißbar	Sehr leicht quer, längs & in der Mitte reißbar	Leicht reißbar	Leicht reißbar
Atmungsaktiv	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Wasserfest	Wasserabweisend	Wasserfest	Wasserabweisend	Nein	Wasserfest	Wasserabweisend	Wasserabweisend	Nein
Strahlen-indifferent	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschriftbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Nachjustierbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Thermo-stabil	–20°C bis +40°C	–20°C bis +40°C	–20°C bis +40°C	–20°C bis +70°C	–20°C bis +70°C	–20°C bis +70°C	–20°C bis +70°C	–20°C bis +70°C
Eigenschaften	Hohe Sofort- und Dauerklebekraft, außergewöhnlich zugfest, wasser-abweisend	Hohe Sofort- und Dauerklebekraft, außergewöhnlich zugfest, wasserfest	Hohe Sofort- und Dauerklebekraft, außergewöhnlich zugfest, wasser-abweisend	Gute Sofort- und Dauer-klebekraft, schmerzarm und rückstandsfrei ent-fernbar, sehr zugfest, gut beschriftbar	Gute Sofort- und Dauerklebe-kraft, wasserfest, dehnbar, anschmiegsam, transparent	Gute Sofort- und Dauerklebe-kraft, schmerzarm und rückstandsfrei entfernbar, anschmiegsam, wasserabwei-send, transparent	Gute Sofort- und Dauerklebe-kraft, schmerzarm und rückstandsfrei entfernbar, gut anschmiegsam, wasser-abweisend	Sicherer Halt, schmerzarm und rückstandsfrei entfernbar, sehr zugfest, gut beschriftbar, mehrfach repositionierbar
Hauptanwendungen	Robustes Fixierpflaster für sicher sitzende Verbände und für Streckverbände	Robustes Fixierpflaster für wasserfeste Ver-bände	Robustes Fixierpflaster mit fein gezacktem Rand für leichte Reiß-barkeit	Sehr hautverträgliches, leicht reißbares Fixier-pflaster mit universellen Einsatzmöglichkeiten	Undurchlässiges Fixierpflaster für Feuchtigkeitsschutz, Okklusivverbände und Bade-anwendungen	Transparentes Fixierpflaster für schnelle Verbände, zur Fixierung von Kanülen geeignet	Sehr anschmiegsames Vlies-pflaster für empfindliche Haut, zur Fixierung von Mess-instrumenten geeignet	Besonders hautschonendes, leicht reißbares Fixierpflaster für einen atraumatischen und schmerzarmen Verband-wechsel

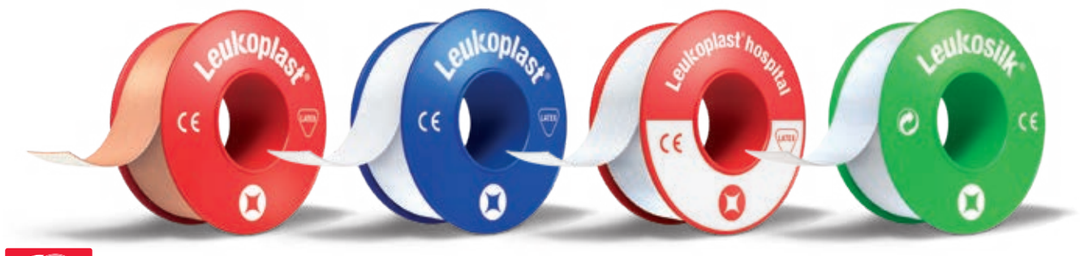





Erfahrung lässt Schwieriges einfach aussehen

Wundauflagen, Katheter, Sonden und Kanülen schnell und einfach sichern – das scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein. Hochwertige Rollenpflaster müssen zuverlässig und dauerhaft auf der Haut haften ohne sie zu reizen oder gar zu beschädigen. Je nach Anwendungsgebiet müssen sie zahlreiche weitere Anforderungen erfüllen wie: Eine hohe Strapazierfähigkeit, wasserabweisende Oberflächen, Thermostabilität, Reißfestigkeit und zugleich leicht abreißbar sein, Durchlässigkeit für Röntgenstrahlen, Verträglichkeit mit Gummi und Kunststoffen und Transparenz.

Perfekt aufeinander abgestimmte Bestandteile

Wir, bei Leukoplast, arbeiten ständig an der Verbesserung all dieser Bestandteile:

- Trägermaterial
- Kleber
- Spule und Schutzring


Warum unterschiedliche Trägermaterialien so wichtig sind

Gewebe

Gewebe sind flache Textilien aus rechtswinklig kreuzenden Garnsystemen; die Fäden bilden ein charakteristisches Webmuster.

Vorteil: Die hohe Festigkeit des Gewebes ist beständig gegenüber hohen Belastungen, einschließlich Zugspannung.

Produktbeispiele: Leukosilk und Leukoplast

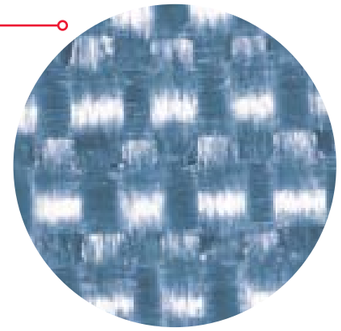


Acetatträger

Vlies

Im Gegensatz zu gewebten Stoffen müssen bei Vlies die Fasern nicht zu Garn verarbeitet werden. Stattdessen werden einzelne Fasern thermisch, mechanisch oder chemisch verbunden, um so eine kontinuierliche Bahn zu erzeugen.
Vliesstoffe für medizinische Zwecke werden hauptsächlich aus synthetischen oder halbsynthetischen Cellulosefasern oder -mischungen gefertigt.

Vorteil: Sehr weich und anschmiegsam sowie luft- und wasserdampfdurchlässig

Produktbeispiele: Leukopor

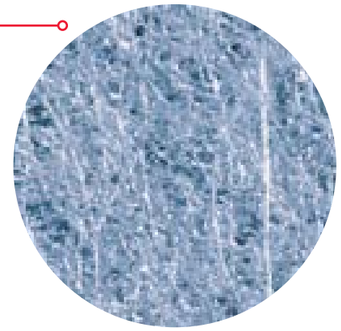


Polyesterviskosevlies

Folie

Folie wird verwendet um ein transparentes Fixierpflaster herzustellen. Als Trägermaterial wird meist Polyethylen (PE) gewählt. Diese Folie ist luft- und wasserdampfdurchlässig und zugleich wasserdicht bzw. wasserabweisend.

Vorteil: Transparent und wasserdicht / wasserabweisend

Produktbeispiele: Leukoflex und Leukofix

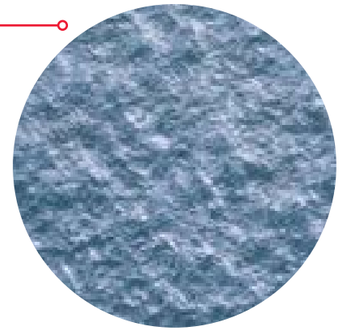

Polyethylen Folie

Warum verschiedene Klebstoffe unterschiedliche Vorteile haben

Nicht nur das Trägermaterial, sondern auch der Klebstoff verleiht dem Rollenpflaster seine spezifischen Eigenschaften. Die Eigenschaften jedes Klebstoffs müssen für die jeweilige Anwendung geeignet sein. Mögliche Anforderungen sind:

- Gute Anfangs- und Dauerhaftung
- Gute Hautverträglichkeit
- Geringstmögliche Beeinträchtigung der natürlichen Hautatmung
- Atraumatische, nahezu schmerzfreie Entfernung ohne Rückstände
- Gute Lagereigenschaften und Haltbarkeit

Zinkoxid-Kautschuk-Klebstoffe

Durch lange und intensive Forschung ist es gelungen, den Zinkoxid-Kautschuk-Kleber zu optimieren und eine sehr sichere und zuverlässige Haftung zu erzielen.

Der Kleber besteht aus mehreren Komponenten:

1. Das Kautschukband, welches sich den Konturen der Haut anpasst
2. Harze, welche die eigentlichen „Klebstoffe" in der Masse sind
3. Lanolin, eine salbenartige Masse aus Wollfett, macht den Kleber weich und geschmeidig
4. Zinkoxid, auch als Zinkweiß bekannt, gibt dem Kleber seine weiße Farbe



Polyacrylat-Klebstoffe

Diese vollsynthetischen Klebstoffe bestehen nur aus Polyacrylat. Sie werden deshalb auch als einkomponentige Klebstoffe bezeichnet. Polyacrylate entstehen durch die Polymerisation von Acrylsäure und ihrer Ester.

Im Gegensatz zu Zinkoxid-Kautschuk-Klebstoffen

- reagieren Polyacrylate nicht mit Gummi und Kunststoffen,
- halten sie die Haftung bei Temperaturen zwischen -20°C und +70°C,
- werden auch als allergenarme Klebstoffe bezeichnet und sind strahlendurchlässig.



Silikonkleber

Silikonklebstoffe werden als Zweikomponentensysteme verwendet; die zwei Komponenten werden miteinander vermischt und bilden eine gelartige Struktur, die bei höheren Temperaturen klebrig wird.

Die Vorteile von Silikonklebern liegen in ihrer Fähigkeit, die Hautoberfläche sofort abzudecken und diese effizient zu benetzen.

Sie können sich grundsätzlich

- sehr gut an Unebenheiten der Haut anpassen,
- leicht von der Haut ablösen und verursachen geringere Schmerzen.



Wie eine Spule gegen Keime hilft

Mehr als 99,9 % MRSA-Reduktion innerhalb von 6 Stunden



Dauerhafter anti-mikrobieller Schutz


Keine Resistenz-entwicklung fest-gestellt **

Leukoplasts ANTIMIKROBIELLE SPULE
Die weltweit ersten Spulen und Schutzringe, die gegen Keime kämpfen! Ihre innovative Materialkombination mit antimikrobiellen Eigenschaften bekämpft Krankheitserreger wie MRSA und verhindert deren Ausbreitung.


Anti-mikrobielle Spule
Mehr als 99,9 % MRSA-Reduktion innerhalb von 6 Stunden

Antimikrobielle Eigenschaften durch pH-Level-Senkung:

Die in das Spulenmaterial eingearbeiteten antimikrobielle Komponente reagieren an der Oberfläche mit der Luftfeuchtigkeit.

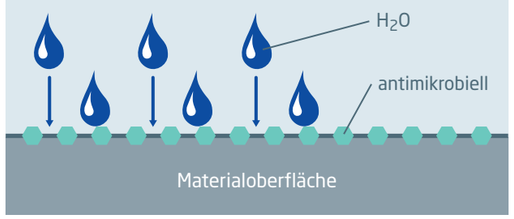

Es bildet sich ein saures Milieu, in dem die pathogenen Keime zerstört werden.

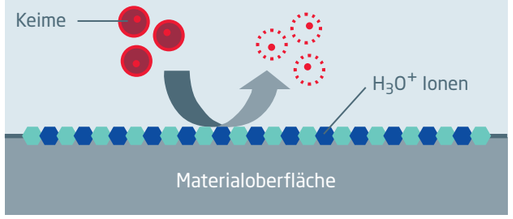

* Based on laboratory studies carried out by SGS Germany GmbH on behalf of BSN Medical GmbH, 2016, data on file

**Yu V., Struensee B., Nehrdich T., and Deing V., "Bioburden Levels of Spools of Surgical Tape in Different Health-Care Settings" EWMA Journal, vol. 19 (1) (2018): 29-33

MEDICAL EXPERIENCE since 1901



Wir unterstützen Sie im Kampf für mehr Hygiene im Alltag

Wir wissen, was Kliniken und Krankenhäuser weltweit für die Gesundheit ihrer Patienten tun, und wollen Sie dabei unterstützen. Denn auch eine Verbesserung von kleinen Dinge kann die größte Wirkung haben! Sie bleiben oft unter dem Radar, werden jedoch alltäglich benutzt: Rollenpflaster.


Tests haben gezeigt, dass verwendete Rollenpflaster durchschnittlich 156 KBE (koloniebildende Einheiten) von potenziell pathogenen Bakterien haben – das heißt, dass Sie eine Infektionsquelle darstellen können. Deshalb haben wir die antimikrobiellen Leukoplast Spulen entwickelt. Neben hygienischen Vorsichtsmaßnahmen, die bereits in der klinischen Praxis vorhanden sind, gibt es nun eine weitere Waffe im Kampf um die Gesundheit Ihrer Patienten!

* Based on laboratory studies carried out by SGS Germany GmbH on behalf of BSN Medical GmbH, 2016, data on file

Leukoplast®



Tipps zur Verwendung von Rollenpflaster

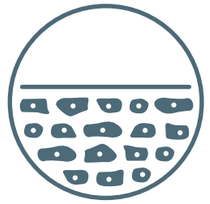

Intakte Haut

Die wichtigste Voraussetzung für das Anlegen von Rollenpflastern ist, dass sie auf intakter Haut angelegt werden. Erstens, weil die Haut immer von der mechanischen Belastung betroffen ist und zweitens, weil sich Hautinfektionen erheblich verschlimmern können, sollte ein Rollenpflaster direkt auf ihnen befestig werden.



Keine Spannung

Das Rollenpflaster sollte nicht unter Spannung oder überdehnt angebracht werden, da dies zu schmerzhaften Hautrissen führen kann. Um eine schmerzfreie Entfernung zu gewährleisten, sollten die Pflaster immer in Haarwuchsrichtung abgezogen werden.



Trocken und sauber

Die Haut sollte immer trocken und sauber sein. Rückstände von Blut, Schweiß, Öl, Puder und andere Substanzen sollten vorher vollständig entfernt werden. Das Rollenpflaster hält dann Verbände und andere medizinische Produkte sicher an Ort und Stelle.



Desinfektionsmittel

Um Hautirritationen zu vermeiden, sollte immer darauf geachtet werden, dass das Desinfektionsmittel, z. B. chirurgischer Alkohol, vor dem Auftragen vollständig verdampft ist. Chirurgischer Alkohol, eingeschlossen unter einem Pflaster, kann die Haut reißen und Rötungen und Entzündungen verursachen.

Die Haut jedes Patienten ist einzigartig und es kann in Einzelfällen dazu kommen, dass diese allergisch auf das eingesetzte Rollenpflaster reagiert. Das Leukoplast skin sensitive, mit seinem Silikonkleber, kann in diesem Fall hilfreich sein unerwünschte Effekte wie Mazeration, mechanischer Stress oder allergische Reaktionen – auch bei überempfindlichen Haut zu vermeiden.

MEDICAL EXPERIENCE since 1901

Leukoplast®





Für eine starke Fixierung

Leukoplast – Der Klassiker für eine langanhaltende Fixierung

Hauptanwendungen: Leukoplast hat eine hohe Anfangs- und Dauerhaftung und klebt auch bei hoher Beanspruchung stark und sicher. Leukoplast eignet sich besonders für kritische Sicherungen und wenn die Haut feucht oder verschwitzt ist.

Trägermaterial: Das Trägermaterial von Leukoplast besteht aus hellbraunen Viskosestoff. Das Gewebe hat eine hervorragende Zugfestigkeit, eine wasserabweisende Oberfläche und verschmutzt nicht leicht.

Kleber: Der Zinkoxid-Kautschuk-Kleber ist mit feinen, luftdurchlässigen Poren ausgestattet. Durch ein spezielles Verfahren kann die Luft die Haut leichter erreichen und die Feuchtigkeit verdunstet schneller. Die Hautverträglichkeit wird durch diese Mikroporen stark verbessert.



Leukoplast wasserfest

Abwischbar, wasserdicht und weiß mit einem Trägermaterial aus einem Viskose-Gewebe: Es haftet zuverlässig auch bei nassen Bedingungen und hat eine extrem hohe Zugfestigkeit.



Leukoplast hospital

Ist ein weißes Rollenpflaster mit gezackten Kanten, die es einfacher gestalten das Rollenpflaster mit der Hand zu reißen. Leukoplast hospital hat eine wasserabweisende Oberfläche und wird immer dann eingesetzt, wenn die Fixierung besonders sicher sein muss.



Für eine hautfreundliche Fixierung

Jede Haut reagiert unterschiedlich auf Naturkautschuk; was den einen nicht stört, bereitet jemand anderem Probleme. Die folgenden Rollenpflaster sind daher mit einem latexfreien Polyacrylat-Kleber ausgestattet. Das Allergiepotenzial ist dabei gering, Sie haben eine gute Anfangs- und Dauerhaftung und lassen sich ohne Rückstände entfernen. Rollenpflaster mit Polyacrylat-Kleber haften auch in nasser Umgebung hervorragend.

Leukosilk – universell, hautfreundlich

Hauptanwendungsgebiete: Leukosilk ist ein Rollenpflaster zur Befestigung aller Arten von Verbänden, Fixierschläuchen, Kathetern, Sonden und Kanülen. Es ist ein atmungsaktives Band und ist sehr strapazierfähig, mit einer hohen Zugfestigkeit und einem geringen Allergiepotential.

Trägermaterial: Das Trägermaterial besteht aus weißen Celluloseacetat mit einer hohen Dichte an besonders feinen Fäden. Das macht Leukosilk weich und sehr anschmiegsam. Leukosilk läßt sich einfach von der Rolle abreißen.



Leukoflex – wasserdicht

Hauptanwendungsgebiete: Leukoflex ist das Rollenpflaster der ersten Wahl, wenn eine von innen und außen undurchlässige, wasserfeste Verbandfixierung erforderlich ist. Leukoflex ist hervorragend geeignet für Okklusivverbände und Patienten mit Wundauflagen, da Sie sich mit Leukoflex waschen und sogar duschen können.

Trägermaterial: Das Trägermaterial besteht aus dünner, transparenter und anschmiegsamer Polyethylenfolie. Die Folie ist dehnbar und leicht waschbar.



Leukopor – atmungsaktiv und anschmiegsam für empfindliche Haut

Hauptanwendungsgebiete: Leukopor eignet sich hervorragend zum Fixieren von Verbänden an empfindlichen Hautstellen, sowie für dauerhafte Verbände, welche häufig gewechselt werden und für Anwendungen in der Intensivpflege. Leukopor ist ein allergenarmes Rollenpflaster, atmungsaktiv, feuchtigkeitsdurchlässig und lässt sich leicht von der Hand reißen.

Trägermaterial: Das Trägermaterial besteht aus dünnem Polyesterviskosevlies und passt sich gut an konturierten Körperpartien an. Die Oberfläche ist wasserabweisend.



Leukofix – transparent und flexibel

Hauptanwendungsgebiete: Leukofix wird immer dann verwendet, wenn Geschwindigkeit und Transparenz erforderlich sind (z. B. in Notfällen oder auf der Intensivstation). Viele unterschiedliche und sogar spezielle Befestigungsanforderungen (z. B. mit Kanülen) können schnell gelöst werden. Seine Transparenz ermöglicht die häufige Kontrolle von Instrumenten und Kanülen ohne den Verband wechseln zu müssen.

Trägermaterial: Die transparente Polyethylenfolie ist perforiert, dadurch atmungsaktiv, feuchtigkeitsdurchlässig, und leicht längs, quer und in der Mitte reißbar. Wundauflagen und Instrumente können so präzise und schnell gesichert werden.





Sensible Haut in den besten Händen.

Wir von Leukoplast glauben daran, dass eine sichere Fixierung von Wundauflagen oder Instrumenten essentiell ist. Die Herausforderung dabei ist: Sie sollte immer an die Bedürfnisse des Patienten und den Einsatzort angepasst werden. Das ist der Grund warum wir gerade sensibler Haut eine besondere Aufmerksamkeit widmen.

Mit Leukoplast skin sensitive haben wir ein Produkt entwickelt, das speziell darauf ausgerichtet ist, die Bedürfnisse sensibler Haut optimal zu versorgen, insbesondere:

- Altershaut, die besondere Bedürfnisse hat,
- medikamentös beanspruchte Haut und
- Baby- und Kleinkinderhaut, die besonders sensibel ist.





Leukoplast skin sensitive

Hauptanwendungsgebiete: Leukoplast skin sensitive stellt sich den Herausforderungen der sensiblen Haut und wird für die sichere Fixierung von Verbänden und die zusätzliche Fixierung von Sonden, Messelementen und Instrumenten empfohlen. Für besonders empfindliche Haut.

Trägermaterial: Das Trägermaterial ist aus weißem Cellulose-acetat mit einer hohen Dichte an besonders feinen Fäden. Das macht Leukoplast skin sensitive weich und sehr anschmiegsam an verschiedene Hautkonturen.

Kleber: Die Silikon-Klebemasse ermöglicht ein atraumatisches Entfernen und bieten zudem zuverlässigen Halt.







Bestellinformation

Abmessung	BE/VE	Bestell-Nr.	PZN
Leukoplast, im Schutzring			
5,0 m x 1,25 cm	24/240	0152100	00625987
5,0 m x 2,50 cm	12/120	0152200	00625993
5,0 m x 5,00 cm	6/60	0152400	00626001
Leukoplast, im Schutzring mit Eurolasche			
5,0 m x 1,25 cm	12/120	0152101	00396096
5,0 m x 2,50 cm	12/120	0152202	00396104
Leukoplast, Anstaltspackung ohne Schutzring			
5,0 m x 1,25 cm	24/240	0153100	04593474
5,0 m x 2,50 cm	12/120	0153200	04593480
5,0 m x 5,00 cm	6/60	0153400	04593497
9,2 m x 1,25 cm	24/240	0153600	04593505
9,2 m x 2,50 cm	12/120	0153700	04593511
9,2 m x 5,00 cm	6/60	0153900	04593528

Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Abmessung	BE/VE	Bestell-Nr.	PZN
Leukosilk, im Schutzring			
5,0 m x 1,25 cm	24/240	0102100	00626219
5,0 m x 2,5 cm	12/120	0102200	00626225
5,0 m x 5,0 cm	6/60	0102400	00626231
Leukosilk, im Schutzring mit Eurolasche			
5,0 m x 1,25 cm	12/120	0102102	00396110
5,0 m x 2,5 cm	12/120	0102203	00397109
Leukosilk, Anstaltspackung ohne Schutzring			
5,0 m x 1,25 cm	24/240	0103100	04593646
5,0 m x 2,5 cm	12/120	0103200	04593652
5,0 m x 5,0 cm	6/60	0103400	04593669
9,2 m x 1,25 cm	24/240	0956600	04593675
9,2 m x 2,5 cm	12/120	0956700	04593681
9,2 m x 5,0 cm	6/60	0956900	04593698

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Abmessung	BE/VE	Bestell-Nr.	PZN
Leukoflex, im Schutzring			
5 m x 1,25 cm	24/240	0112100	00624947
5 m x 2,50 cm	12/120	0112200	00624953
5 m x 5,00 cm	6/60	0112400	01155012
Leukoflex, Anstaltspackung ohne Schutzring			
5 m x 1,25 cm	24/240	0113100	04593445
5 m x 2,50 cm	12/120	0113200	04593451
5 m x 5,00 cm	6/60	0113400	04593468

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Abmessung	BE/VE	Bestell-Nr.	PZN
Leukoplast skin sensitive, im Schutzring			
2,6 m x 1,25 cm	24/240	7617300	15190874
2,6 m x 2,5 cm	12/120	7617301	15190897
1,0 m x 2,5 cm	6/60	7617306	15190911
Leukoplast skin sensitive, ohne Schutzring			
2,6 m x 2,5 cm	12/120	7617500	15190905

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Abmessung	BE/VE	Bestell-Nr.	PZN
Leukoplast hospital, Anstaltspackung ohne Schutzring			
9,2 m x 1,25 cm	24/240	0175600	04593534
9,2 m x 2,50 cm	12/120	0175700	04593540
9,2 m x 5,00 cm	6/60	0175800	04593557

Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Abmessung	BE/VE	Bestell-Nr.	PZN
Leukoplast wasserfest, im Schutzring			
5 m x 1,25 cm	24/240	0232100	00626142
5 m x 2,50 cm	12/120	0232200	00626159
5 m x 5,00 cm	6/60	0232400	00626165

Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Abmessung	BE/VE	Bestell-Nr.	PZN
Leukopor, im Schutzring			
5,0 m x 1,25 cm	24/240	0247100	01698793
5,0 m x 2,50 cm	12/120	0247200	01698801
5,0 m x 5,00 cm	6/60	0247400	01698818
Leukopor, Anstaltspackung ohne Schutzring			
5,0 m x 1,25 cm	24/240	0248100	04593563
5,0 m x 2,50 cm	12/120	0248200	04593586
5,0 m x 5,00 cm	6/60	0248400	04593592
Leukopor, Anstaltspackung auf Kunststoffkern			
9,2 m x 1,25 cm	24/240	0245300	04593600
9,2 m x 2,50 cm	12/120	0245400	04593617
9,2 m x 5,00 cm	6/60	0245500	04593623

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Abmessung	BE/VE	Bestell-Nr.	PZN
Leukofix, im Schutzring			
5,0 m x 1,25 cm	24/240	0212100	01698586
5,0 m x 2,50 cm	12/120	0212200	01698592
5,0 m x 5,00 cm	6/60	0212400	01698600
Leukofix, Anstaltspackung ohne Schutzring			
5,0 m x 1,25 cm	24/240	0213100	04593379
5,0 m x 2,50 cm	12/120	0213200	04593385
5,0 m x 5,00 cm	6/60	0213400	04593391
Leukofix, Anstaltspackung auf Kunststoffkern			
9,2 m x 1,25 cm	24/240	0213600	04593416
9,2 m x 2,50 cm	12/120	0213700	04593422
9,2 m x 5,00 cm	6/60	0213800	04593439

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

70471-01215-00

essity
Leukoplast®, an Essity brand
Essity | BSN medical GmbH · Schützenstraße 1-3 · 22761 Hamburg · www.medical.essity.de
Telefon +49 800/3000789 · Fax +49 800/8501021 ·

Leukoplast®
Wound care in best hands