

DREI SCHRITTE ZUR BLUTENTNAHME



1.
Schutzkappe drehen und abziehen

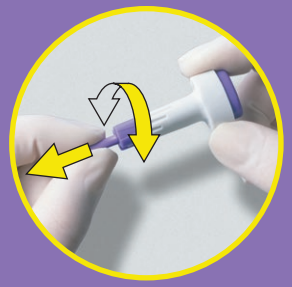

2.
Punktionstiefe einstellen

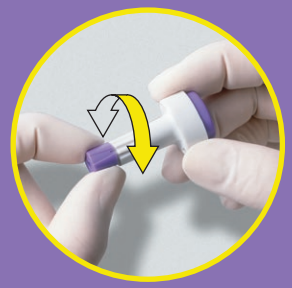

3.
Stechhilfe ansetzen und mit Daumen Punktion auslösen

PROFESSIONELLE EINMAL-STECHHILFEN MIT SAFE-T-TECHNOLOGIE

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus Einmal-Stechhilfen stehen in der praktischen **200 Stück Spenderbox** inkl. Standard-öffnung an der Vorderseite zur Verfügung.



INFORMATIONEN ZUM PRODUKT:

Diabeteshotline: 01/277 27-355

Im Internet: www.accu-chek.at

ACCU-CHEK und SAFE-T-PRO sind Marken von Roche. © 2022 Roche Diabetes Care | www.accu-chek.at | Roche Diabetes Care Austria GmbH | 1210 Wien | Engelhorngasse 3

07662831001 - 01/22

ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus Roche

HYGIENISCH, EINFACH UND VIELSEITIG

geführt durch Safe-T Technologie



DIE VIELSEITIGE **EINMAL-STECHHILFE** FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Roche

HYGIENISCH & EINFACH MIT SAFE-T-TECHNOLOGIE

Für die professionelle Blutgewinnung in Klinik und Praxis sind vor allem zwei Aspekte entscheidend:

- **HYGIENE**
- **EINFACHE HANDHABUNG**


DIE ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS EINMAL-STECHHILFEN
erfüllen einerseits die hohen Anforderungen im Bereich der Hygiene und ermöglichen andererseits eine einfache, intuitive Handhabung in wenigen Schritten.

- Schutzkappe für eine sterile Lanzette
- Aktivierung mittels Druckknopf verhindert versehentliches Auslösen
- Keine Verletzungsgefahr nach Gebrauch
- Wiederverwendung der Lanzette nicht möglich
- Spezieller 3-seitiger Lanzetten-Schliff für sanfte Blutgewinnung

geführt durch Safe-T Technologie

DIE VIELSEITIGE EINMAL-STECHHILFE MIT 3 PUNKTIONSTIEFEN


Accu-Chek Safe-T-Pro Plus ist mit den **3 wählbaren Punktionstiefen** für unterschiedlichste Patientengruppen geeignet *(auch im Neonatologie Bereich)*.

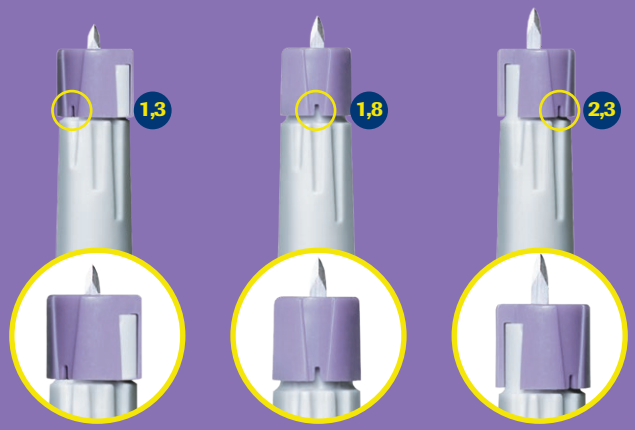

1 zarte Haut | **2** normale Haut | **3** dickere Haut

1 Geringe Punktionstiefe: 1,3 mm
2 Mittlere Punktionstiefe: 1,8 mm
3 Hohe Punktionstiefe: 2,3 mm

EINFACHE BEDIENUNG DURCH ERGONOMISCHE T-FORM

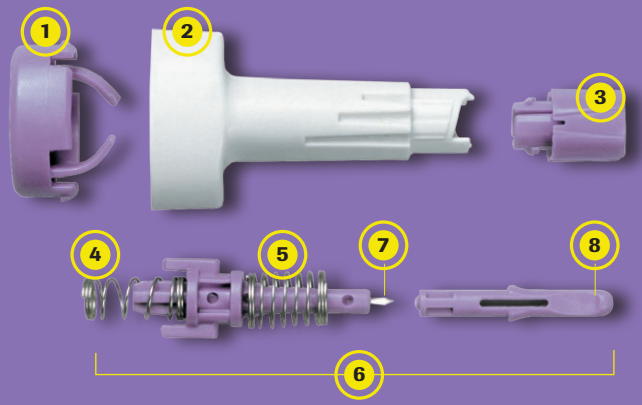

1 Auslöseknopf
2 T-Form Gehäuse
3 Punktionstiefeneinstellung
4 Antriebsfeder
5 Rückziehfeder
6 Lanzette
7 Nadel
8 Schutzkappe



VORBEREITUNG:
Hände nach Bedarf anwärmen. Reinigen Sie die Punktionsstelle entsprechend Ihrer Vorschriften. Zur Kapillarblutentnahme sind die Seiten der Fingerkuppe am besten geeignet.

NACHBEHANDLUNG:
Die Fingerkuppe mit einem sauberen Tuch reinigen und nach Bedarf ein Wundpflaster auflegen.