

Anwendung

Unistik® 3


Einfach, schnell und sicher

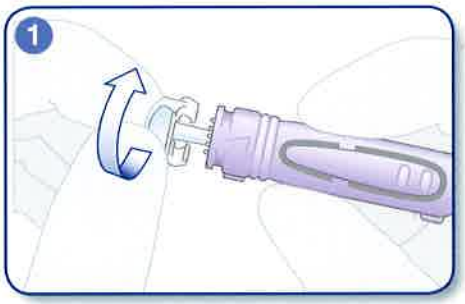


Die Unistik 3 an beiden Seiten halten und die Schutzkappe um 360° drehen, dann abziehen.

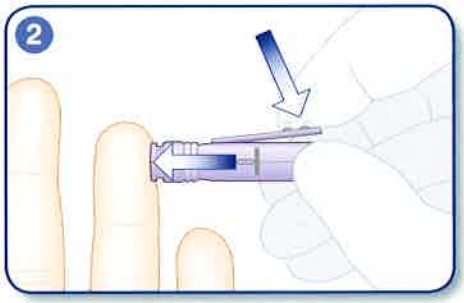

Die Lanzetten-Vorderseite gegen die gewählte Blutentnahmestelle drücken und seitlichen Auslöseknopf betätigen.

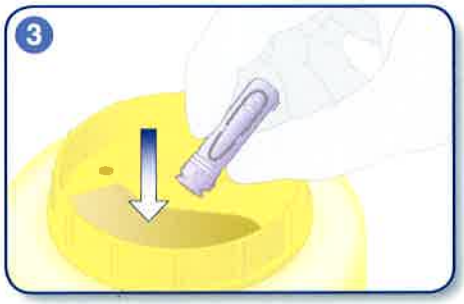

Gebrauchte Lanzette in hierfür vorgesehene Behälter **entsorgen**.

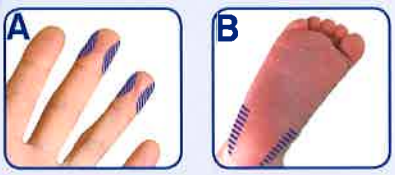

Entnahmestellen

Wählen Sie aus den blau schraffierten Bereichen in Bild A oder B Ihre Blutentnahmestelle.

Klinischer Beweis[2]

Verschiedene Lanzetten wurden an Patienten getestet und zeigten, dass die **Comfort Zone Technology®** (CZT®) den während einer Blutentnahme empfundenen Schmerz im Vergleich zu Lanzetten ohne CZT® erheblich verringert.

Maximaler Schmerzspiegel im Vergleich: Unistik® 3 mit und ohne **CZT®**



2. Dowland P, Edwards C. A single-blind, randomised, 8-way crossover study to compare the blood volume and pain perception of capillary blood sampling – March 2007.



Ein Grund zu lächeln

OWEN MUMFORD

Owen Mumford GmbH, Alte Häge 1, 63762 Großostheim, Deutschland
T: +49 (0)6026/977 50, F: +49 (0)6026/977 529
E: info@owen-mumford.de, www.owen-mumford.de