

BD Safety-Lok™ Blutentnahmeset


Empfohlene Handhabung

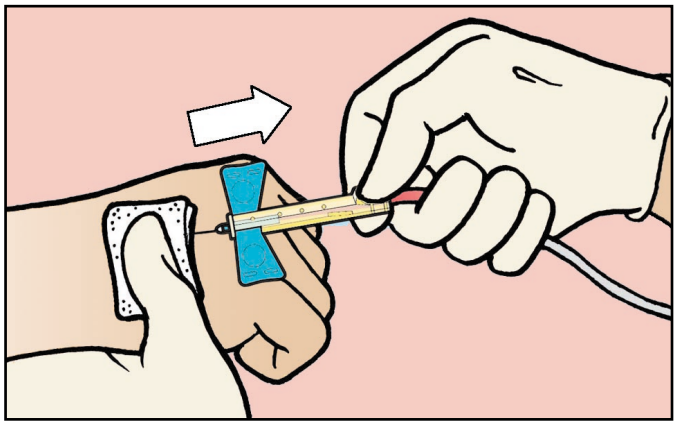

- Nach der Blutentnahme drücken Sie einen Tupfer auf die Punktionsstelle. Halten Sie das gelbe Schutzschild am Ende zwischen Daumen und Zeigefinger, während die restlichen Finger den Schlauch zur Fixierung gegen die Handinnenfläche drücken.

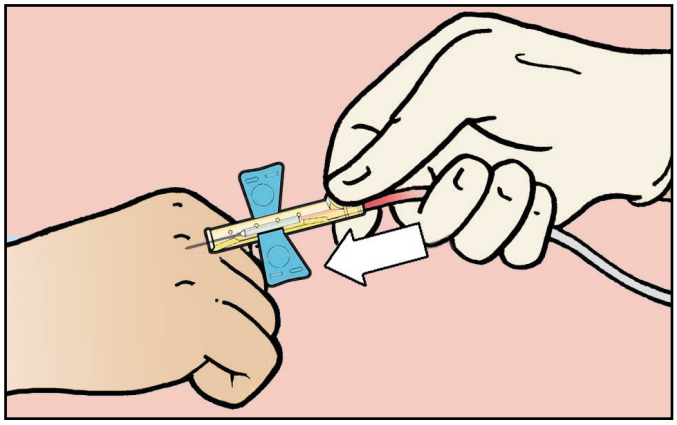

- Halten Sie den Schlauch straff und schieben Sie das Schutzschild mit Ihrem Daumen und Zeigefinger nach vorne, bis ein leichtes „Klicken" zu hören ist.

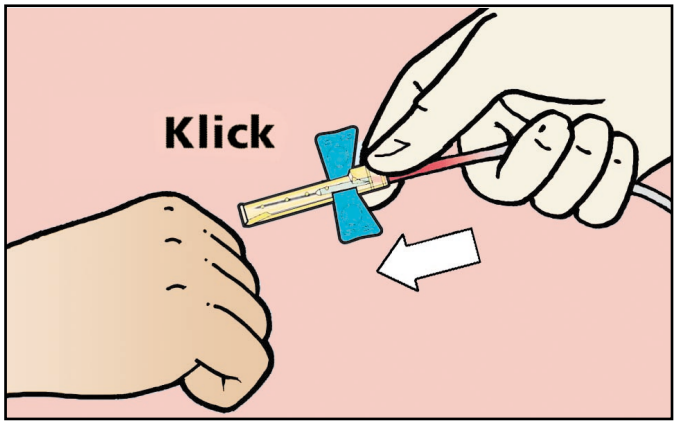

- Das „Klicken" zeigt Ihnen, dass das Schutzschild vollständig nach vorne geschoben ist und sicher die Nadel umschließt.

Bitte entsorgen Sie die Blutentnahmesets entsprechend den Vorschriften Ihres Hauses.

BD Diagnostics, Preanalytical Systems
Tullastr. 8-12 · 69126 Heidelberg
Tel. 06221 305-0 · Fax 06221 305-377 · www.bd.com

BD, BD Logo und Safety Lok sind Warenzeichen von Becton, Dickinson and Company. © 2003 BD.